


☎ (19) 3422-6757

✉ novatecnica@novatecnica.com.br

📍 Rua Elvira Dal Pícolo Degaspari, 177 (Ind. Uninorte II) Água Santa Piracicaba-SP CEP: 13413-650

Modelo NT 145 | Mesa Agitadora Orbital

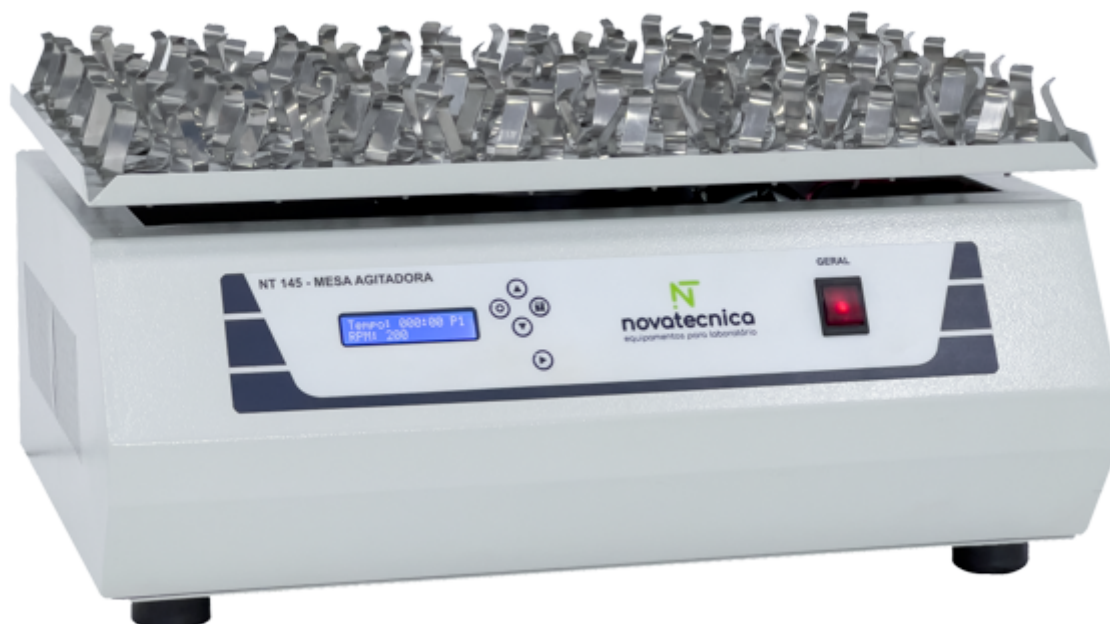

Mesa agitadora de bancada para laboratório, com plataforma de agitação com movimento orbital, para uso universal em laboratórios que necessitam separar ou homogeneizar amostras em erlenmeyers, funil de separação, tubos ou frascos. Compacta e silenciosa proporciona ótimo vórtex. Velocidade de agitação até 240 Rpm, timer digital e capacidade para frascos de 25ml a 2000 ml.


Principais características do produto

- Movimento de agitação orbital
- Velocidade de 40 a 240 Rpm com incrementos de 01 em 01 Rpm
- Controlador de velocidade e tempo microprocessado
- Leitor de Rpm com compensação automática da velocidade
- Display digital LCD alfanumérico com iluminação interna e indicação direta de velocidade (Rpm), Tempo (Hora./min)
- Capacidade para frascos de até 2000 ml
- 10 programas
- Timer de 9999 min e 59 segundos
- Rampa de aceleração ajustável de 5 a 30 segundos (26 níveis)
- Rampa de frenagem ajustável de 5 a 30 segundos (26 níveis)
- Alarme áudio visual para fim de processo e erros
- Montado sob pés de borracha anti-vibratórios
- Gabinete externo em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi texturizado eletrostático
- Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136
- Plataforma de agitação com garras ou presilhas em aço inox AISI 304 para fixação dos frascos, plataforma intercambiável ou plataforma de rolete/universal

Detalhes tecnicos	
Movimento	Orbital
Orbita	20 mm
Capacidade	Frascos até 2000 ml
Velocidade	40 a 240 Rpm - ajuste de 01 em 01 Rpm
Controle de velocidade	Microprocessado digital
Programas	10
Timer Digital	9999 min e 59 segundos
Motor	Motoredutor DC
Dimensão da plataforma (LxP)	500 x 300 mm
Dimensão externa (LxPxA)	500 x 400 x 250 mm
Potência	300 W
Alimentação	Bivolt automático, 50/60Hz
Peso	22 Kg

Acessórios

40 x 25 ml

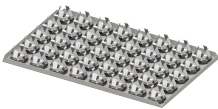


40 x 25 ml

15 x 125 ml




15 x 125 ml

15 x 250 ml

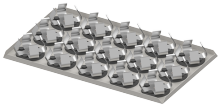


15 x 250 ml

11 x 500 ml

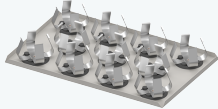


11 x 500 ml

6 x 1000 ml

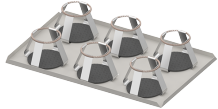

6 x 1000 ml

2 x 2000 ml

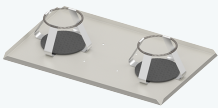

2 x 2000 ml

Plataforma mista

Plataforma mista

Plataforma de rolete

Plataforma de rolete

Plataforma Lisa

Plataforma lisa emborrachada com 02 molas de fixação

Itens que acompanham

01 plataforma com volume/ capacidade a ser definido

Manual de instruções em português

Termo de Garantia de fábrica - 01 Ano

Opcionais

Desenvolvimento de plataforma com características específicas

Certificado de calibração RBC Rastreável

Certificado de calibração Acreditado

Garras adicionais